



SUS2

Sabbagh Universal Spring

The effective Class II treatment



SUS²

Sabbagh Universal Spring



Omega loop
ボールクラスプ(1.0mm)を通して使用
レーザー溶接されています




Outer hexagonal screw
SUS²スクリューキーを用い
口腔内にて容易な装着
(ワイヤーにセット)



Inner hexagonal screw
テレスコープの長さを変えて矯正力を調節




Dual telescope design
コイルスプリング内蔵

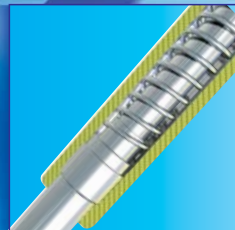

Fixing screw



Arch adapter

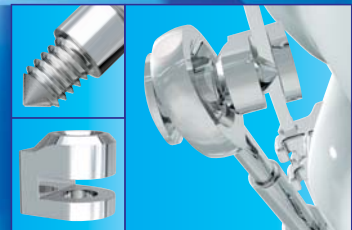

SUS²ターボスプリング(22mm)
Activation with the SUS² turbo-spring
二次的にアクチベートさせたい場合、テレスコープエレメントにセットします

SUS²スペーサーリング(1.0mm/2.0mm)
Easy activation with slotted spacers
テレスコープロッドにセットすることで二次的なアクチベートが容易に行えます



SUS²スクリューキー
Hexagon socket screw key
ヘキサゴンスクリュー(インナー/アウター)の調節に1本で対応します

SUS²を用いたII級症例

早期治療

術前

装着時

術後



ブラケット治療



SUS²(サスツー)は、ClassIIをはじめ、顎関節症や睡眠時無呼吸症候群の治療に適応します。本装置は、テレスコープエレメントに内蔵されたスプリングにより、下顎を前方誘導します。その構造は、スプリングが内蔵されている為、違和感が少なく口腔内を衛生的に保ち、下顎運動を妨げません。また、顎関節への負担も少なくなっています。アーチワイヤーに容易に装着することが可能で、全ての操作はチェアサイドで完結します。付属のターボスプリングやスペーサーを用いさらに前方誘導することも可能です。

医療機器認証番号 224AGBZX0000800



- セット内容**
- ・テレスコープエレメント×2 (607-147-00)
 - ・テレスコープロッド×2 (607-149-00)
 - ・アーチアダプター/フィキシングスクリュー×2 (607-143-00)
 - ・SUS²ピン1.0mm×2 (607-136-00)
 - ・ターボスプリング×2 (607-146-00)
 - ・スペーサーリング1mm×2 (607-103-11)
 - ・スペーサーリング2mm×2 (607-104-11)
 - ・SUS²スクリューキー ※別売 (607-144-00)

※単品でのご注文の場合、セット内容の数量と異なる場合があります。

607-145-01

1セット

D
DENTAURUM

【お問い合わせ先】



株式会社 デンタリード

本社

大阪市淀川区新高1-1-15
TEL 06-6396-4448 FAX 0120-24-0892

東京
営業所

東京都千代田区飯田橋4-4-8 朝日ビル 201号室
TEL 03-5276-0353 FAX 03-5276-0354