




Dual-curing, adhesive cementation
and core build-up composite.



審美性に優れた5色調 Aesthetic

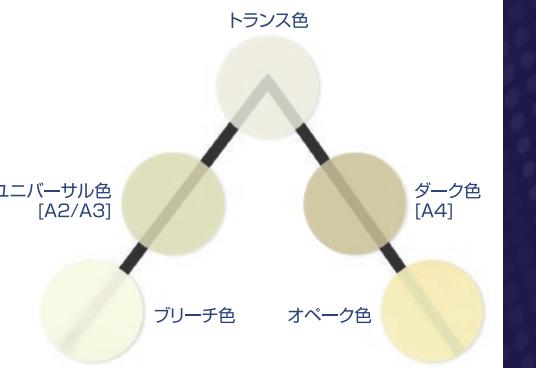

試適用トライインペーストも 審美5色調 Visual Trial



臨床写真提供：石田歯科矯正歯科クリニック 石田 秀幸 先生



KETTENBACH DENTAL
Simply intelligent

販売機器認証番号 2781X00020220062 一般医療機器
医療機器認証番号 304GBZX00129000 普通医療機器

販売業者

DOCI 株式会社デンタリード
本社 / 大阪市淀川区新高1-1-15
東京営業所 / 東京都千代田区神田小川町1-11
TEL: 06 (6396) 4448 フリーフAX: 0120 (24) 0892
TEL: 03 (5217) 0353 FAX: 03 (5217) 0366

製造販売元業者 白水貿易株式会社



2023.09.P500 Ver1.2.1



包装



Package

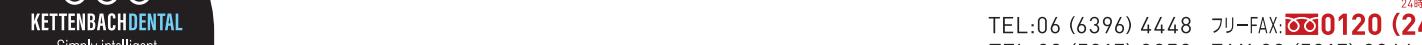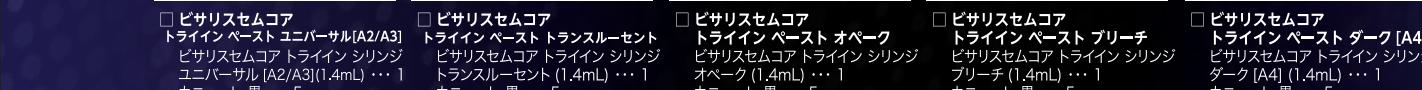

KETTENBACH DENTAL
Simply intelligent



セメント

コア築盛

MDP MONOMER

2IN1

</



2 IN 1

1 シリンジで2役

審美接着性レジンセメントと
高強度コア築盛材が
ひとつに。



臨床写真提供：岩田歯科医院 岩田 淳 先生

CEMENTATION

十分な操作余裕時間 Reliable


練和開始から約6分間

術者に安心の操作余裕時間約6分間。セメントは室内電灯やユニット電灯下でも慌てず、よりスムーズで確実な治療が可能です。



審美性に優れた5色調 Aesthetic

豊富な色調がクラウン・ブリッジ・ベニアに対応

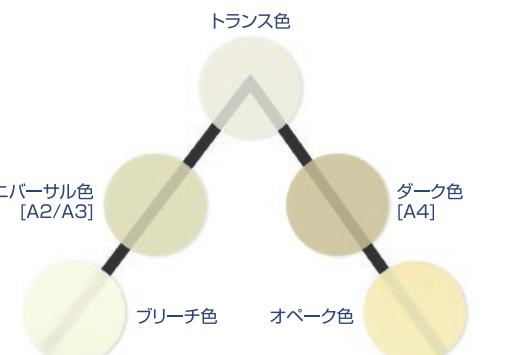

余剰セメントの除去が容易 Easy

除去しやすい半硬化ゲル性状

重合開始剤の配合バランス適確化により、2~3秒の仮照射の後に、探針等で簡単、ラクにきれいに一塊で除去が可能です。



試適用トライインペーストも審美5色調

接着前に色調確認のためのシミュレーションを。

- トランスク
- ユニバーサル [A2/A3]
- ブリーチ
- ダーク [A4]
- オペーク

2 IN 1

セメント



デュアルキュア型

ビスフェノールA非含有

幅広いセメント適応症

- オールセラミック
- ジルコニア
- メタル(ゴールド、ノンプレシャス)
- チタン
- ハイブリッド冠
- ファイバーポスト
- メタルポスト

コア築盛[直接法&間接法]

コア築盛にも最適 Restorative

ファイバーポストと好相性。直接法・間接法いずれも可能。


ベースト適用後、無圧下で崩れせず付形し易い

ベースト適用後、無圧下で崩れず操作性に優れます。



高強度 & 高物性 STRONG

■ 曲げ強さ [MPa]

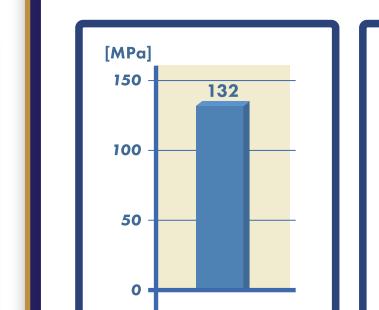

■ X線造影性 [%AI]

CORE BUILD-UP

2種類の極細チップ

コア築盛用に、「細」と「極細」より選べます。



天然歯に近似した切削感 LIKE DENTIN


歯質を削る感覚で切削ができ、形成時にコア材と歯質移行部が滑らかに仕上がりります。




高い接着強さ デュアルキュア型なのに化学重合のみでも高接着強度 High Adhesion

独自の新技術「ACTテクノロジー」により、歯質や各種補綴物に対し高い接着強さを実現。
さらにプライマーにMDPが含有され歯質接着性を向上。

歯質への接着強さ 化学重合のみ

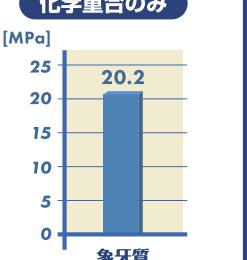

各種補綴物への接着強さ 化学重合のみ

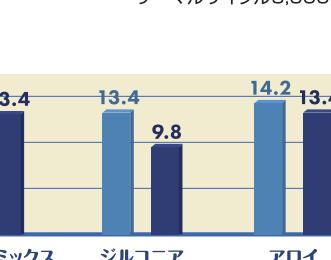


シンプルなシステム 3構成品

独自の疎水性技術により、低い色素吸収性と低変色性を発揮します。



高い色調安定性 COLOR STABILITY

独自の疎水性技術により、低い色素吸収性と低変色性を発揮します。

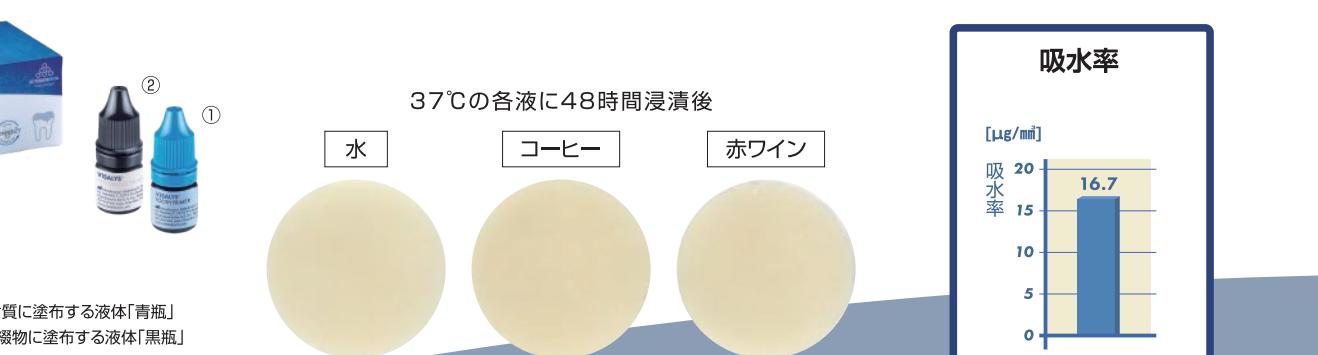

低い吸水率

低変色で寸法安定性に優れ破折を抑制します。