

ビタYZ マルチトランスルーセント				ビタYZ ST		ビタYZ XT	
曲げ強度		歯頸部：1200 MPa, 切縁部：850 MPa		1200 MPa		850 MPa	
透光性		歯頸部：46 %, 切縁部：50 %		46 %		50 %	
イットリウム含有量		歯頸部：4 mol%, 切縁部：5 mol%		4 mol%		5 mol%	
スピード焼結		50分		60分		—	
適 応 症	インレー		●		●		●
	オンレー ラミネートベニア		●		●		●
	前歯クラウン		●		●		●
	前歯一歯欠損 ブリッジ		●		●		●
	前歯二歯欠損 ブリッジ		●		●		●
	臼歯クラウン		●		●		○
	臼歯一歯欠損 ブリッジ		●		●		○
	臼歯二歯欠損 ブリッジ		●		●		×
	インプラント ブリッジ		●		●		×
形態		Φ98.4mm		Φ98.4mm		Φ98.4mm	
高さ		14、18、22、25mm		カラー：14、18、20、25mm マルチカラー：14、18、22mm		カラー：14、18、20、25mm マルチカラー：14、18、22mm	
色調		A1、A2、A3、A3.5、A4、B1、B2、 B3、B4、C1、C2、C3、C4、D2、 D3、D4、OM1、OM2、OM3		・カラー：A1、A2、A3 ・マルチカラー：A1、A2、A3		・カラー：A1、A2、A3 ・マルチカラー：A1、A2、A3	

● 推奨 ○ 可能 × 不可

ラインアップ

[ビタYZ マルチトランスルーセント] 直径：Φ98.4mm

※A4、B1、B2、B3、B4、C1、C2、C3、C4、D2、D3、D4は受注発注製品となります

■ 14mm			■ 18mm		
商品コード	商品名	標準価格	商品コード	商品名	標準価格
13654110	ビタYZ マルチトランスルーセント OM1 14mm	¥29,100	13654140	ビタYZ マルチトランスルーセント OM1 18mm	¥36,300
13654111	ビタYZ マルチトランスルーセント OM2 14mm	¥29,100	13654141	ビタYZ マルチトランスルーセント OM2 18mm	¥36,300
13654112	ビタYZ マルチトランスルーセント OM3 14mm	¥29,100	13654142	ビタYZ マルチトランスルーセント OM3 18mm	¥36,300
13654113	ビタYZ マルチトランスルーセント A1 14mm	¥29,100	13654143	ビタYZ マルチトランスルーセント A1 18mm	¥36,300
13654114	ビタYZ マルチトランスルーセント A2 14mm	¥29,100	13654144	ビタYZ マルチトランスルーセント A2 18mm	¥36,300
13654115	ビタYZ マルチトランスルーセント A3 14mm	¥29,100	13654145	ビタYZ マルチトランスルーセント A3 18mm	¥36,300
13654116	ビタYZ マルチトランスルーセント A3.5 14mm	¥29,100	13654146	ビタYZ マルチトランスルーセント A3.5 18mm	¥36,300
■ 22mm			■ 25mm		
商品コード	商品名	標準価格	商品コード	商品名	標準価格
13654170	ビタYZ マルチトランスルーセント OM1 22mm	¥43,900	13654200	ビタYZ マルチトランスルーセント OM1 25mm	¥45,100
13654171	ビタYZ マルチトランスルーセント OM2 22mm	¥43,900	13654201	ビタYZ マルチトランスルーセント OM2 25mm	¥45,100
13654172	ビタYZ マルチトランスルーセント OM3 22mm	¥43,900	13654202	ビタYZ マルチトランスルーセント OM3 25mm	¥45,100
13654173	ビタYZ マルチトランスルーセント A1 22mm	¥43,900	13654203	ビタYZ マルチトランスルーセント A1 25mm	¥45,100
13654174	ビタYZ マルチトランスルーセント A2 22mm	¥43,900	13654204	ビタYZ マルチトランスルーセント A2 25mm	¥45,100
13654175	ビタYZ マルチトランスルーセント A3 22mm	¥43,900	13654205	ビタYZ マルチトランスルーセント A3 25mm	¥45,100
13654176	ビタYZ マルチトランスルーセント A3.5 22mm	¥43,900	13654206	ビタYZ マルチトランスルーセント A3.5 25mm	¥45,100

関連商品



■ **ビタYZ HT/ST/XT ディスク**

シェード再現性抜群！！

医療機器認証番号 302AKBZX00002000
管理医療機器



■ **ビタYZ HT シェード リキッド**

ブラッシング技法に

医療機器認証番号 302AKBZX00017000
管理医療機器



■ **ビタYZ エフェクト リキッド**

審美性の高い特徴付けに

医療機器認証番号 302AKBZX00017000
管理医療機器



※白水貿易株式会社より販売

■ **ジルコマット6100MS**

■ **v Padコンフォート2**

シンタリングファーン

医療機器届出番号 27B1X00020301006
一般医療機器



※白水貿易株式会社より販売

■ **ビタ バキュマット6100M**

■ **v Padコンフォート2**

ポーセレンファーン

医療機器届出番号 27B1X00020306011
一般医療機器



※白水貿易株式会社より販売

■ **サン ポリッシャー**

かんたんステップで
驚きの輝き！

医療機器届出番号 27B1X00020230012
一般医療機器

記載の標準価格は 2025 年 7 月現在のものです。[税別]

VITA ビタ社(ドイツ)

販売業者 **D D I** 株式会社デンタリード
本社／大阪市淀川区新高1-1-15
東京営業所／東京都千代田区神田小川町1-11
TEL:06 (6396) 4448 フリーFAX: **0120 (24) 0892**
TEL:03 (5217) 0353 FAX:03 (5217) 0366

製造販売元業者 白水貿易株式会社

2025.07.P500 Ver.1.1.1

D D I
DENTALEAD

VITA YZ® MULTI TRANSLUCENT



色調

[プリーチシェード]
OM1、OM2、OM3

[クラシカルシェード]
A1、A2、A3、A3.5

高さ

14mm、18mm、22mm、25mm



VITA

VITA YZ®
MULTI TRANSLUCENT

Shade **A2**
Size Ø 98.4 / h 18 mm

VITA Zahnfabrik
Spitalgasse 3
79713 Bad Säckingen
Germany

CE 0124 MD

occlusal/
incisal side

- あらゆるケースに対応する高い強度と透光性！
- 口腔内で違和感なく調和する自然な色調！
- 4Y-5Y での収縮差なし！高精度の適合！
- VITA シェードガイドとの完全な一致！

**PERFECT
MATCH!**



Made in Germany 

東ソー製の最新のジルコニア材料を使用しています

高透過・高強度。 すべてのケースに、これ一枚。

強さか、美しさか——。
そのジレンマに終止符を打つ“1 for ALL”の答え。
VITA 社の本気が生んだ、次世代のプレミアムジルコニア。
《ビタ YZ マルチトランスルーセント》1 枚であらゆるケースにお応えします。

歯頸部の強度 1200MPa (4Y)！ 切縁部は 850MPa (5Y) を達成！

- 高強度と高透光性を両立させ、インレーから 14 ユニットのモノリシックブリッジ、インプラントの上部構造まで、幅広いケースにおいてマテリアルの性能を最大限に発揮します。
- マルチグラデーションによる色調と明度の変化が、口腔内に溶け込む一体感を再現します。
- 焼結時の収縮率をレイヤー間で 18.7% に統一することで、歪みが少ない高い適合精度を実現します。
- シンタリング焼成時間が 55 分と短く、ラボワークの効率化を高めます。(ジルコマット 6100MS 使用時)



マルチグラデーションテクノロジー

融合することで、 生まれるバランス


一焼結後の強さと美しさを、同時に一

焼結後の強度と審美性が異なる 2 種類のジルコニア材料の長所を融合しています。

1,200 MPa
850 MPa

46 %
50 %

※最適なシェードマッチングを実現するために、
上顎の切縁から約 1mm 下に配置することをお勧めします。

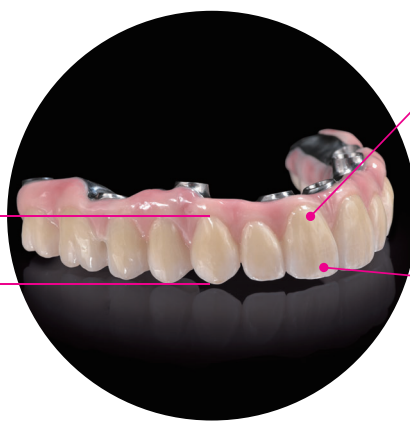

象牙質部から歯頸部まで、
優れた安定性を実現


- 曲げ強度：1200 MPa
- 光透過性：46 %

非常に透明度の高い切縁部

- 曲げ強度：850 MPa
- 光透過性：50 %

安全性

狙った通りに、 ぴたりと決まる

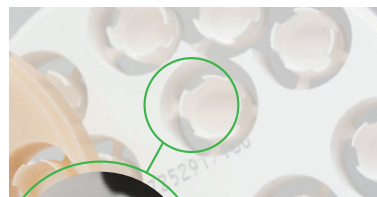


< 0.3mm !

優れたエッジ安定性と寸法安定性を備えており、正確な形態再現性とフィッティング精度を実現します。

製造および品質基準

均一な密度、安定した焼結品質！

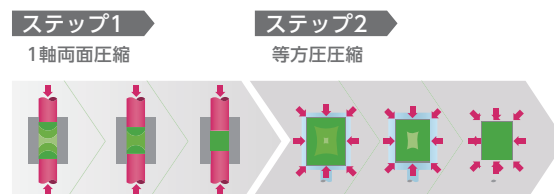

圧縮工程の概略図

高品質な原材料

ビタ YZ は東ソー製の 100% イットリアジルコニア粉末をベースにしています。
原材料の均一な収縮により、ストレスのない焼結が実現します。また、スピード焼結によりロングスパンにおいても高精度なフィッティングが得られます。

ビタ YZ は、まず単軸プレス加工を施し、それぞれの基本形状を得ます。その後、高圧容器内で等方圧圧縮を行い、均一な密度に仕上げます。
この工程は均一な焼結特性を得るために不可欠な工程です。予備焼結プロセスは個々の材料に合わせて正確に調整されます。

ドイツで製造

世界中の経験豊富な歯科技工士と協力してドイツのエンジニアにより開発されました。
製造と設計においてドイツの品質基準を満たしています。



天然歯との調和

ジルコニア独特の“明る過ぎる発色”を抑え、 口腔内での“自然な色調”再現が可能



— ビタ YZ マルチトランスルーセントは、現場のリアリズムに應える 1 枚です —

臨床で“なじむ色”を実現

ジルコニアにありがちな「明るすぎる発色」を抑え、口腔内で自然に溶け込む色調を実現。
焼成後のやや暗めのトーンが、周囲の歯との高い調和性を生み出します。

ステインで仕上がる自由度


落ち着いたベース色により、ステインの微調整がしやすく、色調再現の自由度が高く天然歯のような奥行きのある修復物制作が可能です。

前歯から臼歯まで幅広く対応

審美性と強度のバランスに優れ、前歯・臼歯・ブリッジまで幅広い適応症例に対応。
多用途に活用できる“実践型”マルチレイヤージルコニアです。

スムーズなグラデーション

色の境目がない自然なグラデーションが、 美しい歯列を演出！

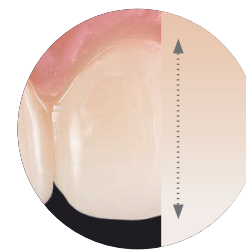

グラデーションでラインがなく自然な歯列を再現します。

シェードマッチ

狙った色調を忠実に再現！ 安定したシェード再現性



ビタ独自のシェードテクノロジーにより、ビタシェードガイドとの完全マッチを再現。

ビタクラシカル A1-D4 とブリーチシェード 3 色をご用意しています。

効率性



わずか 55 分でシンタリング焼成！

YZ スピード焼結プログラムでは、審美性と強度を損なうことなく、最大 14 ユニットの修復物を焼結出来ます。さらに、スピードプログラムを使用しない場合でも約 100 分で焼結が完了します。

ビタYZ マルチトランスルーセント シンタリング パラメータ ※ビタ ジルコマット						
ユニバーサルプログラム	室温 ℃	上昇 ℃/分	最高 ℃	係留 分	冷却 ℃	リフトポジション %
	≤ 200	17	1450	30	200	100

ビタYZ マルチトランスルーセント シンタリング パラメータ ※ビタ ジルコマット												
スピードプログラム	室温 ℃	上昇 ℃/分	温度 ℃	係留 分	上昇 ℃/分	最高 ℃	係留 分	冷却 ℃/分	リフト ポジション %	冷却 ℃/分	リフト ポジション %	冷却 ℃/分
	200	90	800	5	50	1450	30	750	100	600	70	400

ビタYZ マルチトランスルーセント シンタリング パラメータ ※ビタ ジルコマット以外												
ユニバーサルプログラム (他社メーカー)	室温 ℃	上昇 ℃/分	温度 ℃	係留 分	冷却 ℃/分	最高 ℃	係留 分	リフト ポジション %	冷却 ℃/分	温度 ℃	係留 分	リフト ポジション %
	200	17	1520	30	-5	1000	-	100	-	200	-	100

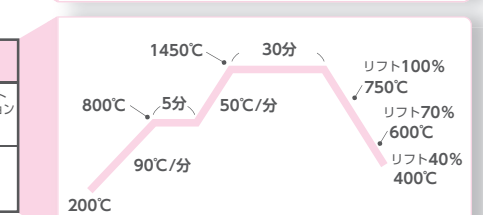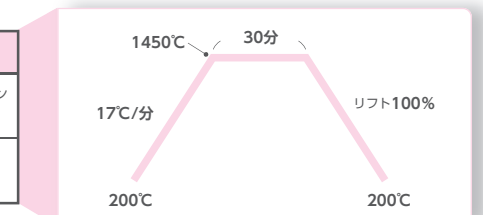

＼早い／
55 分で
焼成完了